

Аппарат лазерный терапевтический Рикта-03/2

ИМ-7.2669/2304

лазер инфракрасный, количество каналов 3, режим импульсный, длина волны 640 / 875 / 905 нм

Милта ПКП ГИТ ЗАО, Россия



Параметры лазера

Тип лазера	инфракрасный
Количество каналов	3
Режимы	импульсный
Длина волны	640 / 875 / 905 нм

Параметры аппарата

Размер	245×220×95 мм
--------	---------------

Описание

Рикта-03/2 – физиотерапевтический аппарат действие которого основано на импульсном терапевтическом лазере (905 нм). Применяется в дерматологии, урологии, кардиологии, косметологии, педиатрии, урологии, спортивной медицине и др.

Терапевтические факторы:

- ☐ Импульсный терапевтический лазер (905 нм) – основное действие.
- ☐ Инфракрасное излучение (875 нм).
- ☐ Красный свет (640 нм).
- ☐ Магнитное поле (35 мТл).

Особенности аппарата Рикта-03/2:

- Регулировка мощности лазерного и инфракрасного излучения (необходимо при лечении детей, а также лиц старше 80 лет с некоторыми острыми и хроническими заболеваниями).
- Возможность подключения разных видов излучателей.
- Возможность работы одновременно с тремя излучателями.

Предустановленные программы:

1. общее оздоровление
2. НЛОК
3. раны / ожоги / язвы
4. инфекции кожи / ногтей
5. суставы кисти / стопы
6. сустав тазобедренный
7. суставы: плечевой, локтевой, лучезапястный, коленный, голеностопный
8. ринит
9. синусит / гайморит
10. фарингит / трахеит
11. ангина / тонзиллит
12. гипертония
13. косметология лица
14. депрессия
15. пользовательские программы

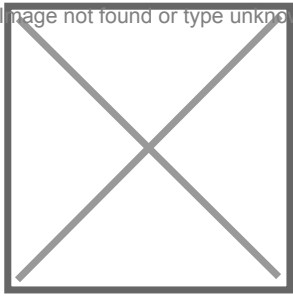
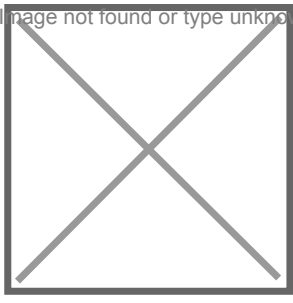
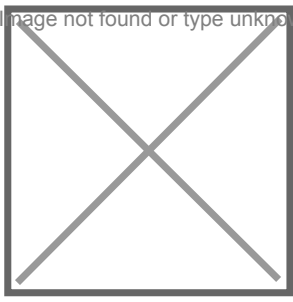
Технические характеристики

Частота импульсов лазера и ИК	постоянная: 5, 50, 1000 Гц переменная: 250-1 Гц
Частота импульсов красного света	2 Гц
Длительность процедуры	0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 10 мин
Питание	от сети 220 В, 50 Гц
Размеры	245×220×95 мм
Вес	2 кг

Излучатели для аппарата Рикта-03/2

Аппарат Рикта-03/2 имеет модульную конструкцию: к блоку управления подключаются излучатели. Конструкция предусматривает возможность одновременной работы с тремя излучателями.

В комплект поставки аппарата входит один излучатель Т1-03. Другие излучатели приобретаются дополнительно.

	Излучатель Т1-03 имеет мощность лазерного излучения 16 Вт и подходит для лечения пациентов любых возрастов, в том числе и детей, начиная с грудного возраста. Излучатель Т2-03 имеет мощность лазерного излучения 20 Вт и эффективнее для взрослых пациентов до 80 лет.
	Излучатели Т1Е-03 и Т2Е-03 позволяют совмещать лазерную терапию с TENS-терапией (чрескожной электронейростимуляцией). Это сочетание позволяет получить быстрый обезболивающий эффект. Применяются при невралгиях, мышечных и суставных болях, болях в позвоночнике и пр. Т1Е-03 и Т2Е-03 аналогичны по мощности, факторам воздействия и рекомендациям излучателям Т1-03 и Т2-03.
	Излучатель ДУШ 1-03 – матричный излучатель с излучающей поверхностью 20 см². Мощность излучателя – 30 Вт. Рекомендуется в случаях, когда требуется воздействовать на поверхность большой площади. Излучатель ДУШ 1(50)-03 с мощностью 50 Вт. Рекомендуется применять, когда требуется большая интенсивность воздействия (лечение крупных суставов и позвоночника).