

Автоклав Tuttnauer Elara 9

ИМ-7.102477 до 16.03.2020

паровой, объем камеры 19.8 л, настольный, загрузка горизонтальная, программы 8 шт., режим свободного программирования, сушка, принтер, полок 4 шт., 66×48.5×44 см, мощность 1.8 / 2.2 кВт, вес 60 кг

Tuttnauer Ltd., Израиль



Характеристики

Тип	паровой
Объем камеры	19.8 л
Размещение	настольный
Тип загрузки	горизонтальная
Количество программ	8
Режим свободного программирования	Да
Сушка	Да
Принтер	Да
Количество полок	4
Размеры	66×48.5×44 см
Мощность	1.8 / 2.2 кВт
Вес	60 кг

Описание

Настольный автоклав Elara 9 представляет собой надежный автоклав Класса В, предназначенный для медицинских, стоматологических и ветеринарных клиник.


Модификации:

- Elara 9i генерирует пар внутри камеры.
- Elara 9D создает пар с помощью встроенного парогенератора, обеспечивая быстрые циклы.

Конструкция:

- Самоблокирующаяся дверца легко открывается и закрывается одной рукой.
- Камера из долговечной нержавеющей стали 316L имеет более длительный срок эксплуатации, чем конкурирующие камеры из нержавеющей стали 304.

- Дверца с зеркальной полировкой поверхности имеет высокую устойчивость к коррозии.
- Больше места на полках по сравнению с другими автоклавами с камерами емкостью от 17 до 20 литров.

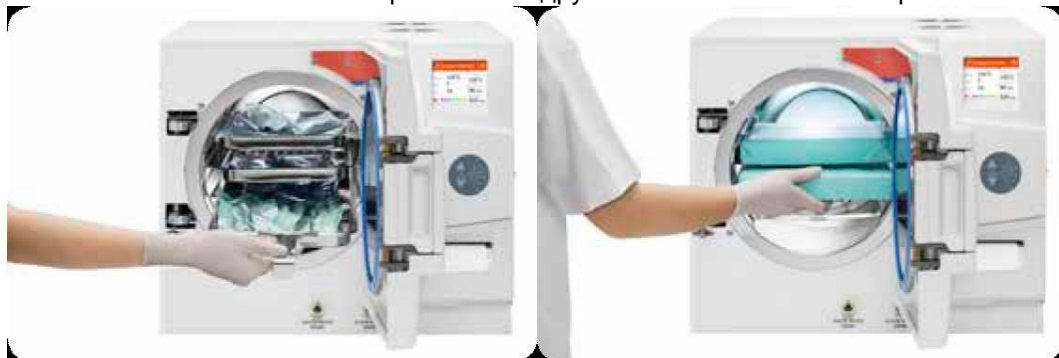

- Возможность наполнения водой спереди и сверху.
- Фронтальное наполнение водой позволяет использовать пространство над автоклавом.
- Автоматическая проверка качества воды предупреждает пользователя о подаче воды ненадлежащего качества. Защищает камеру автоклава от отложений коррозионных минералов в воде низкого качества.
- Автоматическая подача воды (опционально) обеспечивает автоматическое наполнение автоклава.

Программы стерилизации:

- 5 предустановленных программ, 2 тестовых программы Боуи-Дика и испытание на герметичность, а также 20 настраиваемых программ.
- Тестирование Боуи-Дика, также совместимое с тестовым устройством Helix, включает время стерилизации 3.5 минуты без сушки.
- Испытание на герметичность проверяет камеру под вакуумом на наличие утечки.

Предустановленные программы

Программа цикла	Тип загрузки	Режим	Время сушки		Время цикла	
			Elara 9D	Elara 9i	Elara 9D	Elara 9i
Без упаковки 134	Инструменты без упаковки	134°C – 4 мин	1 мин	2 мин	17 мин	21 мин
С упаковкой 134	Инструменты с упаковкой	134°C – 4 мин	20 мин	25 мин	24 мин	42 мин
Без упаковки 121	Хрупкие инструменты без упаковки	121°C – 20 мин	1 мин	2 мин	32 мин	34 мин
С упаковкой 121	Хрупкие инструменты с упаковкой	121°C – 20 мин	20 мин	25 мин	34 мин	59 мин
Прион 134	Прион	134°C – 18 мин	20 мин	25 мин	34 мин	56 мин

Безопасность:

- Если дверца открыта или не заблокирована надлежащим образом, цикл не запускается.
- Автоматическое защитное устройство с двойной блокировкой не допускает открытия дверцы до тех пор, пока камера находится под давлением.

Управление:

- Инновационный цветной дисплей.
- Дружественная к пользователю трехкнопочная панель управления позволяет с легкостью просматривать программы стерилизации и пользовательские каталоги.

Отчетность:

- С каждым автоклавом поставляется высококачественный термопринтер.
- Данные последних 200 циклов хранятся в памяти и могут быть экспортированы на USB носитель.
- Компьютерная программа R.PC.R (опционально) автоматически записывает данные циклов на ваш компьютер.