


Набор для чрескожной трахеостомии Portex Blue Line

ИМ-7.110766 до 07.10.2026

для трахеостомии по методике Григгса, с зажимом /
без зажима

Smiths Medical ASD, Inc., США

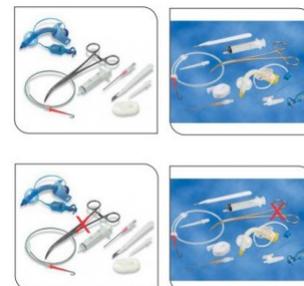

Характеристики

Назначение	для трахеостомии по методике Григгса
Тип	с зажимом / без зажима

Дополнительные характеристики

Наборы для чрескожной трахеостомии Portex Griggs предназначены для чрескожной трахеостомии по методике Григгса с целью обеспечения проходимости дыхательных путей. Для наложения трахеостомы пациентам отделений реанимации и интенсивной терапии, нуждающимся в длительной ИВЛ.

Набор, состоящий из стерильных хирургических инструментов, перевязочных материалов/тампонов, шприца, расширителей, трахеостомической трубки и других предметов, предназначенных для создания чрескожного отверстия в трахее (трахеостомии) для введения трахеостомической трубки для устранения обструкции верхних дыхательных путей и обеспечения возможности искусственной вентиляции легких. Это изделие для одноразового использования.

Характеристики

- Чрескожная дилатационная трахеостомия предлагается как альтернатива классической хирургической методике и характеризуется максимальной атравматичностью, простой техникой и быстротой выполнения.
- Наложение трахеостомы происходит без рассечения колец трахеи и с минимальной травмой претрахеальных тканей.
- Метод чрескожной трахеотомии основан на известной методике Сельдингера с применением гибкого проводника, заведенного в просвет трахеи.
- Применение многоразовых металлических дилатационных щипцов, нанизываемых на проводник (методика Григгса), для формирования канала трахеостомы, позволяет выполнить процедуру наиболее быстро с высокой степенью безопасности.

1. Набор для чрескожной трахеостомии Portex Griggs с зажимом

Кат. номер	Размер трубки (внутр. диаметр)	Внешний диаметр	Длина трубки
100/540/070CZ	7.0 мм	10.5 мм	70 мм
100/540/080CZ	8.0 мм	11.9 мм	75.5 мм
100/540/090CZ	9.0 мм	13.3 мм	81 мм

Состав набора: скальпель, игла-интродьюсер 14G, шприц 10 мл, проволочный гибкий J-образный проводник с интродьюсером, короткий дилататор 14Fr, дилатационные щипцы Ховарда-Келли, трахеостомическая трубка Blue Line с obturatorом.

2. Набор для чрескожной трахеостомии Portex Griggs без зажима

Кат. номер	Размер трубки (внутр. диаметр)	Внешний диаметр	Длина трубки
100/542/070CZ	7.0 мм	10.5 мм	70 мм
100/542/080CZ	8.0 мм	11.9 мм	75.5 мм
100/542/090CZ	9.0 мм	13.3 мм	81 мм

Состав набора: скальпель, игла-интродьюсер 14G, шприц 10 мл, проволочный гибкий J-образный проводник с интродьюсером, короткий дилататор 14Fr, трахеостомическая трубка Blue Line с obturatorом.

3. Набор для чрескожной трахеостомии Portex Griggs с зажимом и трубкой с возможностью надманжеточной аспирации

Кат. номер	Размер трубки (внутр. диаметр)	Внешний диаметр	Длина трубки
100/547/070CZ	7.0 мм	10.5 мм	70 мм
100/547/080CZ	8.0 мм	11.9 мм	75.5 мм
100/547/090CZ	9.0 мм	13.3 мм	81 мм

Состав набора: скальпель, игла-интродьюсер 14G, шприц 10 мл, проволочный гибкий J-образный проводник с интродьюсером, короткий дилататор 14Fr, дилатационные щипцы Ховарда-Келли, трахеостомическая трубка Blue Line Suctionaid с obturatorом.

4. Набор для чрескожной трахеостомии Portex Griggs без зажима с трубкой с возможностью надманжеточной аспирации

Кат. номер	Размер трубки (внутр. диаметр)	Внешний диаметр	Длина трубки
100/548/070CZ	7.0 мм	10.5 мм	70 мм
100/548/080CZ	8.0 мм	11.9 мм	75.5 мм
100/548/090CZ	9.0 мм	13.3 мм	81 мм

Состав набора: скальпель, игла-интродьюсер 14G, шприц 10 мл, проволочный гибкий J-образный проводник с интродьюсером, короткий дилататор 14Fr, трахеостомическая трубка Blue Line Suctionaid с obturatorом.