


Повязка пенная Yafho Foam Dressing

ИМ-7.118795

повязка, хирургический, противопрлежневый, стерильный

Yafho Bio-Technology, Китай

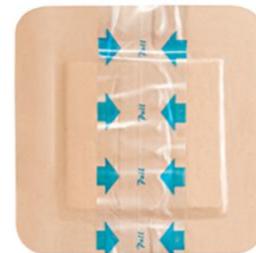

Характеристики

Исполнение	повязка
Тип	хирургический
Противопрлежневый	Да
Вид	стерильный

Описание

Пенная повязка Yafho Foam Dressing – стерильное покрытие для лечения ран с различным уровнем экссудации. Основу изделия составляет мягкий полиуретановый пенный слой, который активно поглощает вертикальный поток экссудата и надежно удерживает его внутри, поддерживая стабильную влажную среду для оптимального заживления. Наружный слой из воздухопроницаемой пленки защищает рану от попадания воды и бактерий извне.

Повязка представлена в нескольких модификациях, что позволяет врачу подобрать оптимальный вариант в зависимости от состояния перифокальной кожи и необходимости визуального контроля:

- **Неадгезивная (без клейкого слоя)** – требует вторичной фиксации, подходит для пациентов с повышенной чувствительностью кожи.
- **С адгезивной каймой** – обеспечивает надежную самостоятельную фиксацию на здоровой коже вокруг раны.
- **Адгезивная со смотровыми отверстиями** – инновационная форма, позволяющая контролировать степень пропитывания повязки экссудатом без её снятия.

Показания к применению:

- пролежни (II-IV стадии);
- диабетические язвы стопы;
- венозные язвы нижних конечностей;
- послеоперационные и хирургические раны;

- травматические повреждения кожи и ссадины;
- ожоги первой и второй степени;
- донорские участки кожи.

Варианты исполнения и размерная сетка

Размер	Неадгезивная	С адгезивной каймой	Со смотровым окном
5×5 см	628006	–	–
7.5×7.5 см	628001	наличие	–
8×10 см	–	–	625208
10×10 см	628002	наличие	–
10×10.8 см	628007	–	–
10×15 см	–	–	625215
10×20 см	–	наличие	625220
10×25 см	–	наличие	625225
10×30 см	–	наличие	625230
12.5×12.5 см	628003	наличие	–
15×15 см	628004	наличие	–
15×20 см	628005	–	–

Преимущества:

- высокая сорбционная способность благодаря многослойной структуре;
- защита раневого ложа от механических воздействий за счет мягкой пенной сердцевины;
- атравматичность – повязка не прилипает к влажной поверхности раны;
- длительный срок использования – может оставаться на ране до 7 дней;
- стерилизовано этиленоксидом (ЭО).