



## Гигиена полости рта



NSK

ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА

LED

# Varios series

Многофункциональные ультразвуковые скалеры

## Выдающаяся производительность и многофункциональность

Скалеры Varios оснащены последними разработками в области пьезоэлектричества. Новейшая технология iPiezo engine от компании NSK обеспечивает стабильную выходную мощность при помощи автоматической регулировки частоты ультразвуковых колебаний до оптимального значения в зависимости от уровня нагрузки, приложенного к насадке. Новые, более тонкие наконечники Varios 2 без оптики позволяют доктору работать более эффективно за счет значительного улучшения доступа к рабочей области. Новый наконечник Varios 2 с оптикой является самым тонким и легким наконечником в мире из всех существующих на данный момент.\* Двойной светодиод обеспечивает превосходную, практически бестеневую видимость, существенно улучшая условия работы в зоне проведения операции.

Гигиена полости рта



Двойная подсветка LED

### Преимущества

- Самый тонкий и легкий наконечник со светодиодной технологией\*
- Система iPiezo engine от компании NSK обеспечивает стабильную выходную мощность и высокую производительность
- Два световода из сотообразного стекла передают свет от двух светодиодов
- Наконечник с оптикой или без оптики на выбор
- Большой выбор насадок для широкого спектра операций

ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА

NSK

Хорошо сбалансированный, тонкий и легкий наконечник

Тонкий наконечник обеспечивает уверенную работу за счет превосходной видимости и отличного доступа к рабочей зоне. Наконечник может многократно автоклавироваться при температуре до 135°C.



Varios2 Наконечник




Производитель А

Самый тонкий и легкий\*

ø9,5 мм



LED Наконечник **С оптикой** VA2-LUX-HP

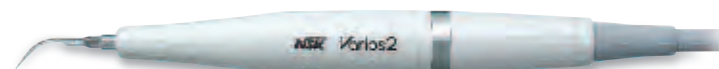

Наконечник **Без оптики** VA2-HP

Гигиена полости рта



Светодиодная оптика LED от NSK излучает дневной свет, что дает вам значительное преимущество в работе.

**Ярче** : LED излучает дневной свет, обеспечивающий лучший обзор обрабатываемого участка, чем свет от галогенной лампы.

**Надежнее** : Светодиод LED имеет больший срок службы и более надежен по сравнению с галогенными лампами.



## iPiezo engine®



### Функция обратной связи

Система iPiezo engine от NSK поддерживает необходимую мощность работы насадки в зависимости от состояния поверхности зуба. iPiezo engine обеспечивает стабильную частоту колебаний насадки без потери мощности даже при удалении очень твердых зубных отложений.

### Функция автонастройки

Функция автонастройки поддерживает постоянную частоту колебаний насадки в пределах выбранного уровня мощности. Это позволяет доктору чувствовать выходную мощность и быть уверенным в оптимальном результате лечения.

NSK

ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА

# Varios 970

С оптикой / Без оптики

## iPiezo engine®

LED

### Многофункциональный портативный прибор для широкого спектра операций

Все в одном – стильный компактный универсальный прибор для Пародонтологии, Снятия зубных отложений, Минимально инвазивных операций и Ухода за имплантами. Удобные вместительные емкости по 400 мл, заполняемые одинаковыми или различными растворами, подсоединены к независимым друг от друга насосам. Все скалеры из новой серии Varios оснащены последними разработками в области пьезотехнологии; генератор iPiezo engine от NSK обеспечивает стабильную выходную мощность при помощи автоматической регулировки частоты ультразвуковых колебаний до оптимального значения в зависимости от нагрузки.



### Преимущества

- Все в одном – один стильный и компактный аппарат для Пародонтологии, Эндодонтии, Снятия зубных отложений, Реставрации и Ухода за имплантами.
- Стабильная частота вибрации и мощность благодаря системе iPiezo engine.
- Удобные емкости большого объема по 400 мл каждая, два отдельных насоса, возможность использования различных растворов.
- Превосходное освещение рабочей зоны обеспечивается за счет передачи света от двух светодиодов по двойному световоду из сотообразного стекла.

### Технические характеристики

• Питание	: 230В переменного тока, 50/60 Гц
• Частота	: 28-32 кГц
• Макс. мощность	: 11 Вт (режим G)
• Размеры	: Ш160 x Д270 x В190 (мм) (включая емкости)
• Вес блока	: 2,1 кг (без наконечника)
• Объем емкости	: 400 мл (x 2 емкости)

ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА

NSK

### Характеристики

- Легкая замена емкостей с раствором
- Простое обслуживание в условиях клиники
- Смена режима работы одним прикосновением: Эндодонтия, Пародонтология или Общий режим
- Наглядное отображение на дисплее 10-ти уровней мощности и подачи охлаждения
- Простая в использовании функция сохранения настроек работы пользователя в памяти
- Установка уровня подачи охлаждения одним прикосновением. Выбор между подачей охлаждения из емкости, водопровода или без охлаждения
- Отдельные регуляторы подачи охлаждения для емкостей и водопровода



### Большой светодиодный дисплей

Все рабочие параметры четко видны на большом LED-дисплее и легко регулируются при помощи интуитивно-понятных кнопок.



### Режим автоматической очистки

Режим автоматической очистки включается одним нажатием и предназначен для очистки трубок подачи охлаждения, каналов в наконечнике и насадках после применения специальных растворов. Активная система очистки прочищает обе ветви подачи охлаждения по отдельности.




### Ножное управление с 360°

Новой педалью Varios 970 можно легко управлять с любой стороны.



### Бокс для стерилизации

Наконечник, насадки и ключи для замены насадок могут стерилизоваться вместе в одном боксе для вашего удобства.

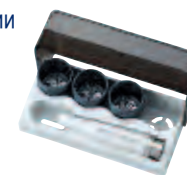

### Комплекты Varios 970

**С оптикой** Комплекты Varios 970 с оптикой

МОДЕЛЬ VA970 LUX (230V) КОД ЗАКАЗА Y1001168

**Без оптики** Комплекты Varios 970 без оптики

МОДЕЛЬ VA970 (230V) КОД ЗАКАЗА Y1001175



### Комплектация

- Блок управления • Наконечник • Шланг наконечника • 3 насадки (G4, G6, G8) • Педаль (FC-70) • 2 емкости
- 3 ключа для замены насадок с ограничителем крутящего момента • Кабель питания • Бокс для стерилизации

NSK

ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА

# Varios 570

С оптикой / Без оптики

iPiezo engine®

LED

## Компактный и универсальный

Varios 570 позволяет использовать три режима работы в зависимости от используемой насадки: "G"(общий), "E"(эндодонтия) and "P"(пародонтология). Уровень мощности можно точно настроить в пределах выбранного режима. В частности, в режиме "P" насадка будет работать на минимальной, но устойчивой мощности для эффективного периодонтального лечения.

### Преимущества

- Функция iPiezo engine
- Компактный корпус
- Интуитивно-понятная и удобная панель управления



### Технические характеристики

• Питание	: AC 100В-240В 50/60 Гц
• Частота	: 28-32 кГц
• Макс. мощность	: 11 Вт (режим G)
• Размеры	: Ш160 x Д135 x В65 мм
• Вес системы	: 0,43 кг

## Комплекты Varios 570

**С оптикой** Комплекты Varios 570 с оптикой

МОДЕЛЬ VA570 LUX (230V) КОД ЗАКАЗА Y1001273

**Без оптики** Комплекты Varios 570 без оптики

МОДЕЛЬ VA570 (230V) КОД ЗАКАЗА Y1001269

### Комплектация

- Блок управления со шлангом наконечника
- Блок питания
- Наконечник
- Набор с фильтром для воды
- Соединительное устройство системы подачи воды
- Педаль (FC-70)
- 3 насадки (G4, G6, G8)
- Ключ для замены насадок с ограничителем крутящего момента

ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА

NSK

# Varios 370

С оптикой / Без оптики

iPiezo engine®


LED

## Компактный многофункциональный блок управления, помещающийся на ладони

Varios 370 был специально разработан как компактный портативный прибор, который легко устанавливается на любую стоматологическую установку. Он прост в управлении и может использоваться для широкого спектра клинических применений.


### Преимущества

- Функция iPiezo engine
- Портативный и ультракомпактный блок управления
- Простая интуитивно-понятная панель управления

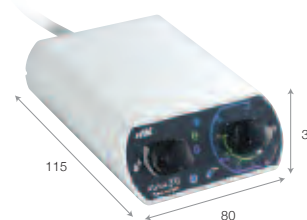

### Технические характеристики

• Питание	: 100-240В AC 50/60 Гц
• Частота	: 28-32 кГц
• Макс. мощность	: 11 Вт (режим G)
• Размеры	: Ш80 x Д115 x В32 мм (без регуляторов и шланга)
• Вес системы	: 0,43 кг (без наконечника)

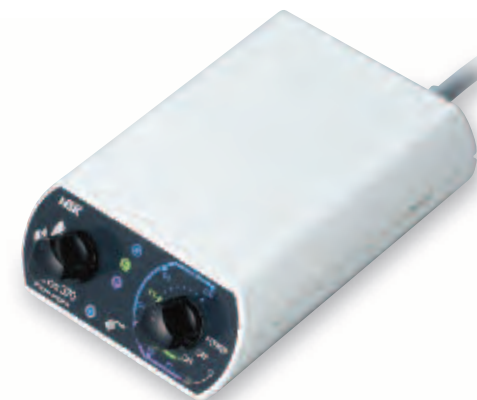

## Примеры установки Varios 370



На плече столика врача стоматологической установки при помощи кронштейна (приобретается отдельно).

Над/под столиком врача при помощи держателя.

## Комплекты Varios 370

**С оптикой** Комплекты Varios 370 с оптикой

МОДЕЛЬ VA370 LUX (230V) КОД ЗАКАЗА Y1001343

**Без оптики** Комплекты Varios 370 без оптики

МОДЕЛЬ VA370 (230V) КОД ЗАКАЗА Y1001340

### Комплектация

- Блок управления со шлангом наконечника
- Держатель блока управления
- Блок питания
- Наконечник
- Держатель наконечника
- Набор с фильтром для воды
- Педаль (FC-71)
- 3 насадки (G4, G6, G8)
- Ключ для замены насадок с ограничителем крутящего момента

NSK

ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА

LED

# Varios 170

С оптикой / Без оптики


## iPiezo engine®

Встраиваемый многофункциональный ультразвуковой скалер

Малогабаритный модуль для простого монтажа в любую стоматологическую установку

Varios 170 – самый маленький в мире встраиваемый модуль с оптикой\*. Модуль оснащен системой iPiezo engine от NSK, которая гарантирует стабильную выходную мощность в течение всего времени работы. Новый более тонкий и очень легкий наконечник с двумя светодиодами легко размещается на свободном месте на блоке врача и управляется уже имеющейся педалью стоматологической установки.

Гигиена полости рта

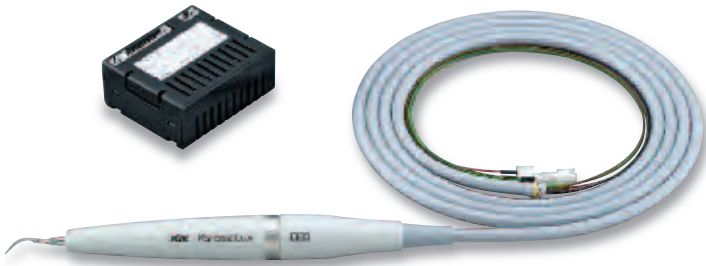

### Технические характеристики

- Питание : 24В ±10% переменного тока (или 24-36В постоянного тока)
- Частота : 28-32 кГц
- Макс. мощность : 11 Вт
- Размеры : Ш63 x Д54 x В26 (мм)
- Все модуля : 59 г

### Бокс для стерилизации

Наконечник, насадки и ключи для замены насадок могут стерилизоваться вместе в одном боксе для вашего удобства.



### Комплекты Varios 170

С оптикой Комплекты Varios 170 с оптикой

МОДЕЛЬ VA170LUX КОД ЗАКАЗА Y1002114

Без оптики Комплекты Varios 170 без оптики

МОДЕЛЬ VA170 КОД ЗАКАЗА Y1002115

### Комплектация

- Встраиваемый модуль • Наконечник • Шланг наконечника • 3 насадки (G4, G6, G8)
- 3 ключа для замены насадок с ограничителем крутящего момента • Бокс для стерилизации

ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА

NSK

# Varios 750

С оптикой / Без оптики

Универсальные стоматологические скалеры

Компания NSK разработала ультразвуковую систему Varios 750, которую можно использовать для различных стоматологических операций. Varios 750 используется для лечения в пародонтологии, эндодонтической хирургии и реставрационных работах с минимальным хирургическим вмешательством. Использование данной системы особенно эффективно при лечении в области, пораженной пародонтом, для удаления зубного камня и дезинфекции зубодесневых карманов. В эндодонтической хирургии система применяется для удаления, чистки и освобождения корневых каналов от содержимого. В реставрационной терапии предусматривается обработка зуба по MI-технологии. Помимо возможности подключения проточной воды система Varios 750 оборудована специальной ёмкостью, которую можно использовать для медицинских растворов.



Гигиена полости рта

### Технические характеристики

- Питание : 230 В переменного тока, 50/60 Гц
- Частота : 28-32 кГц
- Макс. мощность : 8 Вт (режим G)
- Размеры : Ш162 x Д274 x В120 мм
- Вес : 2,2 кг
- Объём ёмкости : 350 мл



### Комплекты Varios 750

С оптикой Комплект Varios 750 LUX

МОДЕЛЬ VA750 LUX (230V) КОД ЗАКАЗА Y141059

Без оптики Комплект Varios 750

МОДЕЛЬ VA750 (230V) КОД ЗАКАЗА Y141052


### Комплектация

- Блок управления • Наконечник • Шланг наконечника • 3 насадки (G1, G4, G6) • Педаль (FC-60)
- Набор с фильтром для воды • 2 емкости для растворов • Ключ для замены насадок с ограничителем крутящего момента • Держатель для насадок • Колпачок для насадки типа S • Кабель питания


## Насадки Varios2 / Varios

Насадки от NSK могут устанавливаться на наконечники ультразвуковых скалеров Varios и Varios2, а также на наконечники ультразвуковых скалеров Satelec®. Дополнительно NSK производит ряд насадок для установки на наконечники ультразвуковых скалеров EMS®.

Ниже представлено иллюстрированное руководство по всем насадкам Varios, их применению и подключению.

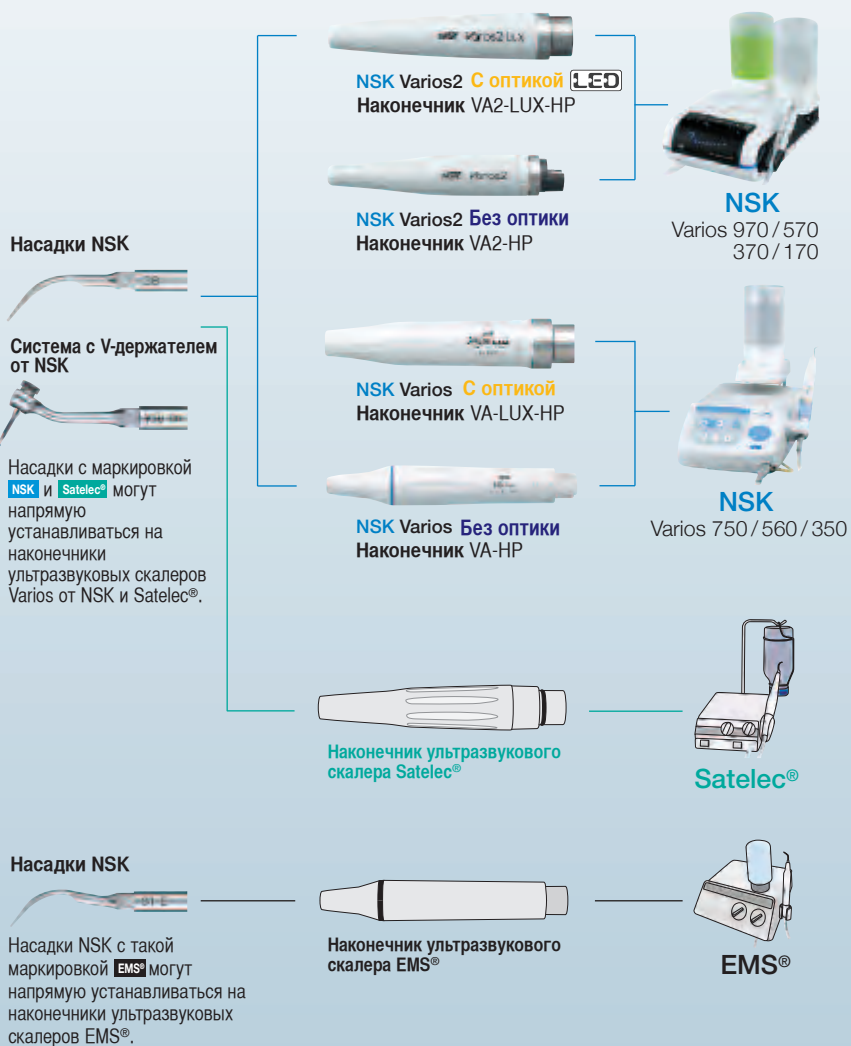

Компания NSK предлагает широкий выбор насадок к ультразвуковым скалерам для различного клинического применения.

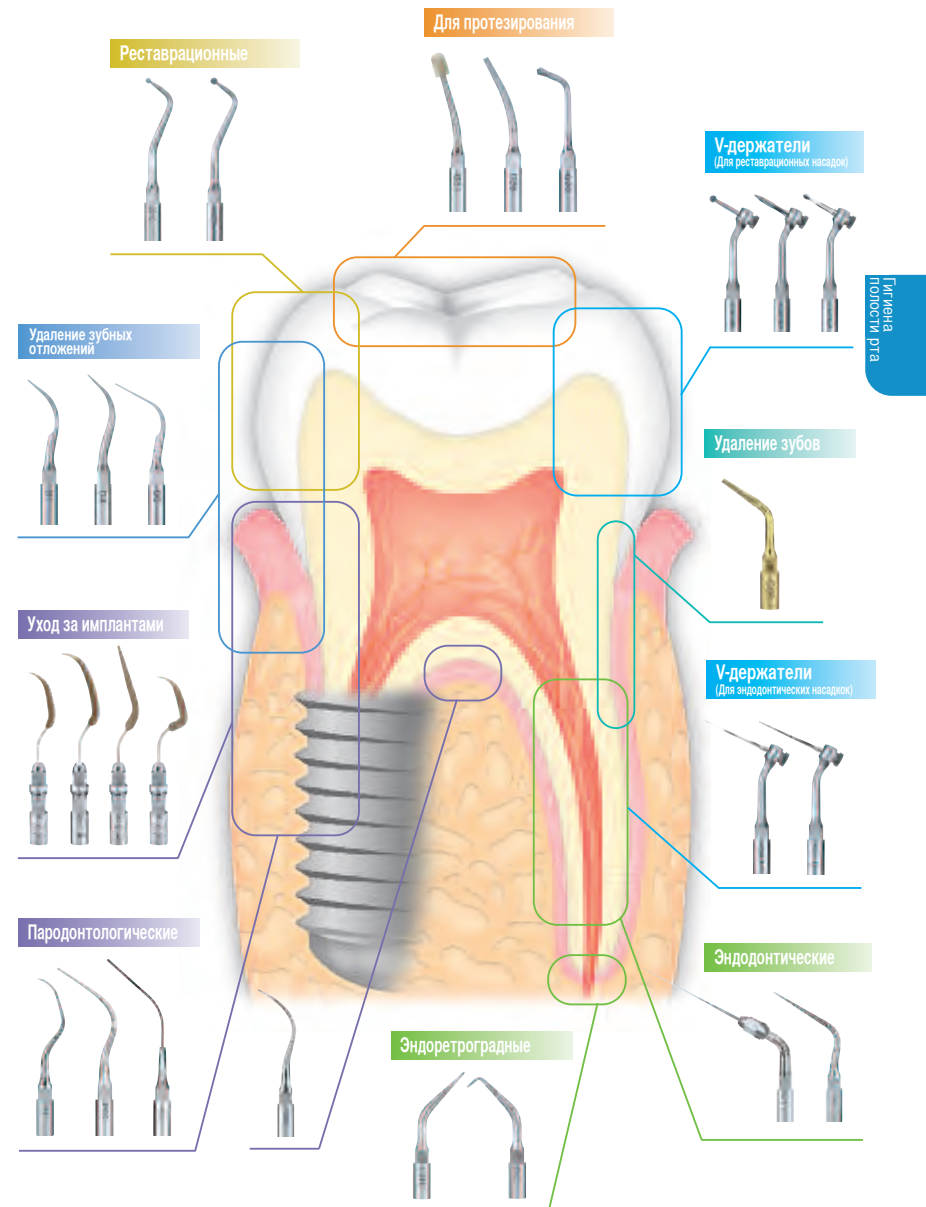

## Насадки для ультразвуковых скалеров Varios

## Удаление зубных отложений

Схема поперечного сечения	Изображение насадки	Изображение насадки	Изображение насадки	Модель	Код заказа	NSK Satelec®	EMS®
				МОДЕЛЬ G1	КОД ЗАКАЗА Z217101		
				МОДЕЛЬ G1-E	КОД ЗАКАЗА Z291101		
				МОДЕЛЬ G2	КОД ЗАКАЗА Z217102		
				МОДЕЛЬ G2-E	КОД ЗАКАЗА Z291102		
				МОДЕЛЬ G3	КОД ЗАКАЗА Z217103		
				МОДЕЛЬ G3-E	КОД ЗАКАЗА Z291103		
				МОДЕЛЬ G4	КОД ЗАКАЗА Z217104		
				МОДЕЛЬ G4-E	КОД ЗАКАЗА Z291104		
				МОДЕЛЬ G5	КОД ЗАКАЗА Z217105		
				МОДЕЛЬ G6	КОД ЗАКАЗА Z217106		
				МОДЕЛЬ G6-E	КОД ЗАКАЗА Z291106		
				МОДЕЛЬ G8	КОД ЗАКАЗА Z217108		
				МОДЕЛЬ G9	КОД ЗАКАЗА Z217109		
				МОДЕЛЬ G11	КОД ЗАКАЗА Z217411		
				МОДЕЛЬ G12	КОД ЗАКАЗА Z217412		
				МОДЕЛЬ G13	КОД ЗАКАЗА Z217413		



## Насадки для ультразвуковых скалеров Varios

Пародонтология  
(Обработка корней зубов)

Схема поперечного сечения	Изображение насадки	Изображение насадки	Изображение насадки	Модель	Код заказа	NSK Satelec®	EMS®
				МОДЕЛЬ P1	КОД ЗАКАЗА Z217404		
				МОДЕЛЬ P1D	КОД ЗАКАЗА Z217405		
				• С алмазным покрытием			
				МОДЕЛЬ P2D	КОД ЗАКАЗА Z217402		
				• С алмазным покрытием • С наклоном вправо (Сверху)			
				МОДЕЛЬ P3D	КОД ЗАКАЗА Z217403		
				• С алмазным покрытием • С наклоном влево (Сверху)			
				МОДЕЛЬ P10	КОД ЗАКАЗА Z217410		
				• С острой кромкой			
				МОДЕЛЬ P11R	КОД ЗАКАЗА Z217408		
				• С острой кромкой • С наклоном вправо			
				МОДЕЛЬ P11L	КОД ЗАКАЗА Z217409		
				• С острой кромкой • С наклоном влево			
				МОДЕЛЬ P20	КОД ЗАКАЗА Z217420		
				МОДЕЛЬ P20-E	КОД ЗАКАЗА Z291420		
				МОДЕЛЬ P21R	КОД ЗАКАЗА Z217422		
				• С наклоном вправо (Сверху)			
				МОДЕЛЬ P21R-E	КОД ЗАКАЗА Z291422		
				МОДЕЛЬ P21L	КОД ЗАКАЗА Z217421		
				• С наклоном влево (Сверху)			
				МОДЕЛЬ P21L-E	КОД ЗАКАЗА Z291421		



## Насадки для ультразвуковых скалеров Varios

Пародонтология  
(Обработка корней зубов)Схема  
поперечного  
сечения

(Сверху)

- С наклоном вправо

NSK Satelec®  
МОДЕЛЬ P25R КОД ЗАКАЗА Z217424

EMS®

МОДЕЛЬ P25R-E КОД ЗАКАЗА Z291424



(Сверху)

- С наклоном влево

NSK Satelec®  
МОДЕЛЬ P25L КОД ЗАКАЗА Z217425

EMS®

МОДЕЛЬ P25L-E КОД ЗАКАЗА Z291425



- С наклоном вправо

NSK Satelec®  
МОДЕЛЬ P26R КОД ЗАКАЗА Z217426



- С наклоном влево

NSK Satelec®  
МОДЕЛЬ P26L КОД ЗАКАЗА Z217427

## Насадки для ультразвуковых скалеров Varios

Пародонтология  
(Промывание и очистка)Схема  
поперечного  
сечения

- Для промывания (диаметр 0,6 мм)

NSK Satelec®  
МОДЕЛЬ P40 КОД ЗАКАЗА Z217550



- Для промывания (диаметр 0,8 мм)

NSK Satelec®  
МОДЕЛЬ P41 КОД ЗАКАЗА Z217555



## Насадки для ультразвуковых скалеров Varios Уход за имплантатами (V-держатели)

## Perio-Control



V-держатель



NSK Satelec®  
МОДЕЛЬ V10 КОД ЗАКАЗА Z217041

- Ключ для замены насадок E-типа включен в комплект
- Пластиковая насадка приобретается отдельно

Схема  
поперечного  
сечения

МОДЕЛЬ V-P10 КОД ЗАКАЗА Y900184

- Набор из 3-х штук
- Держатель V10 не включен в комплект



МОДЕЛЬ V-P12 КОД ЗАКАЗА Y1002167

- Набор из 3-х штук
- Держатель V10 не включен в комплект



(Сверху)

МОДЕЛЬ V-P11R КОД ЗАКАЗА Y1002165

- С наклоном вправо • Набор из 3-х штук
- Держатель V10 не включен в комплект



(Сверху)

МОДЕЛЬ V-P11L КОД ЗАКАЗА Y1002166

- С наклоном влево • Набор из 3-х штук
- Держатель V10 не включен в комплект



МОДЕЛЬ V-P26R КОД ЗАКАЗА Y1002168

- С наклоном вправо • Набор из 3-х штук
- Держатель V10 не включен в комплект



МОДЕЛЬ V-P26L КОД ЗАКАЗА Y1002169

- С наклоном влево • Набор из 3-х штук
- Держатель V10 не включен в комплект





## Насадки для ультразвуковых скалеров Varios

## Эндодонтия

Схема  
поперечного  
сечения

○



• Для чистки корневых каналов

МОДЕЛЬ E4

NSK Satelec®

КОД ЗАКАЗА Z217428

○



• С алмазным покрытием • Для расширения корневых каналов

МОДЕЛЬ E4D

NSK Satelec®

КОД ЗАКАЗА Z217528

○



• Не требует подачи охлаждения • Боковое уплотнение

МОДЕЛЬ E5

NSK Satelec®

КОД ЗАКАЗА Z217305

○



• Не требует подачи охлаждения • Боковое уплотнение

МОДЕЛЬ E6

NSK Satelec®

КОД ЗАКАЗА Z217306

○



• Не требует подачи охлаждения • Для удаления наполнителя и посторонних материалов

МОДЕЛЬ E7

NSK Satelec®

КОД ЗАКАЗА Z217307

○



• С алмазным покрытием • Для расширения корневых каналов

МОДЕЛЬ E7D

NSK Satelec®

КОД ЗАКАЗА Z217317

○



• Не требует подачи охлаждения • Для удаления наполнителя и посторонних материалов

МОДЕЛЬ E8

NSK Satelec®

КОД ЗАКАЗА Z217308

○



• С алмазным покрытием • Для расширения корневых каналов

МОДЕЛЬ E8D

NSK Satelec®

КОД ЗАКАЗА Z217318



## Насадки для ультразвуковых скалеров Varios

## Эндодонтия

ø1,1



• С алмазным покрытием • Для обнаружения устья корневых каналов

МОДЕЛЬ E15D

NSK Satelec®

КОД ЗАКАЗА Z217319



## Насадки для ультразвуковых скалеров Varios

## Эндодонтия

## Держатель для U-файлов с углом наклона 120°

\* Файлы приобретаются  
отдельно

МОДЕЛЬ E11

NSK Satelec®

КОД ЗАКАЗА Z217031

• Для U-файлов (диаметр 0,8 мм) • Для чистки корневых каналов • Для передних зубов

## Держатель для файлов с углом наклона 95°

\* Файлы приобретаются  
отдельно

МОДЕЛЬ E12

NSK Satelec®

КОД ЗАКАЗА Z217032

• Для U-файлов (диаметр 0,8 мм) • Для чистки корневых каналов • Для задних зубов



МОДЕЛЬ U files 33 mm / # 15 КОД ЗАКАЗА Y900062

• ISO15 • Набор из 6-ти штук



МОДЕЛЬ U files 33 mm / # 20 КОД ЗАКАЗА Y900063

• ISO20 • Набор из 6-ти штук



МОДЕЛЬ U files 33 mm / # 25 КОД ЗАКАЗА Y900064

• ISO25 • Набор из 6-ти штук



МОДЕЛЬ U files 33 mm / # 30 КОД ЗАКАЗА Y900065

• ISO30 • Набор из 6-ти штук



МОДЕЛЬ U files 33 mm / # 35 КОД ЗАКАЗА Y900066

• ISO35 • Набор из 6-ти штук

Каждый набор E11, E12 или V30 включает 1 ключ для замены насадок.  
При заказе других насадок ключ в комплект не входит.  
В этом случае заказывайте ключ отдельно.

Всегда сверяйтесь с приведенной ниже таблицей для определения  
нужной рабочей длины файла во избежание его поломки.

	#15	#20	#25	#30	#35
E11	22 мм	24,5 мм	22 мм	22 мм	22 мм
E12	22 мм	24,5 мм	24,5 мм	24,5 мм	22 мм



## Насадки для ультразвуковых скалеров Varios

## Эндоретроградные

Схема  
поперечного  
сечения

NSK Satelec®

МОДЕЛЬ E30RD КОД ЗАКАЗА Z217212

• С алмазным покрытием • Для задних зубов (с наклоном вправо)



NSK Satelec®

МОДЕЛЬ E30LD КОД ЗАКАЗА Z217213

• С алмазным покрытием • Для задних зубов (с наклоном влево)



NSK Satelec®

МОДЕЛЬ E31D КОД ЗАКАЗА Z217210

• С алмазным покрытием • Для передних зубов (с наклоном 70°)



NSK Satelec®

МОДЕЛЬ E32D КОД ЗАКАЗА Z217211

• С алмазным покрытием • Для передних зубов (с наклоном 90°)



## Насадки для ультразвуковых скалеров Varios

## Удаление зубов

Схема поперечного сечения



• Нитрид-титановое покрытие • Толщина 0,7 мм

МОДЕЛЬ G95

КОД ЗАКАЗА Z217705

NSK

## Насадки для ультразвуковых скалеров Varios

Реставрация зубов  
(с минимальным вмешательством)

0,9  
1,0



• С алмазным покрытием

МОДЕЛЬ G61D

КОД ЗАКАЗА Z217601

NSK Satelec®

1,23  
1,4



• С алмазным покрытием

МОДЕЛЬ G62D

КОД ЗАКАЗА Z217602

NSK Satelec®

1,33  
0,75



• С алмазным покрытием

МОДЕЛЬ G65D

КОД ЗАКАЗА Z217605

NSK Satelec®

0,75 1,33



• С алмазным покрытием

МОДЕЛЬ G66D

КОД ЗАКАЗА Z217606

NSK Satelec®

1,63  
1,0



• С алмазным покрытием

МОДЕЛЬ G67D

КОД ЗАКАЗА Z217607

NSK Satelec®

1,0 1,63



• С алмазным покрытием

МОДЕЛЬ G68D

КОД ЗАКАЗА Z217608

NSK Satelec®

## Насадки для ультразвуковых скалеров Varios

## Уплотнение



• Не требует подачи охлаждения • Для передних зубов • 3 колпачка в комплекте

МОДЕЛЬ G21

КОД ЗАКАЗА Z217010

NSK Satelec®



• Не требует подачи охлаждения • Для задних зубов • 3 колпачка в комплекте

МОДЕЛЬ G22

КОД ЗАКАЗА Z217020

NSK Satelec®



• Автоклавируемый • Для насадок G21 / G22 (Набор из 10-ти штук)

МОДЕЛЬ Tip Cap

КОД ЗАКАЗА Y140751

ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА

## Насадки для ультразвуковых скалеров Varios

## Замена вкладок/уплотнение



• Удаление штифтов

МОДЕЛЬ G26

КОД ЗАКАЗА Z217206

NSK Satelec®



• Не требует подачи охлаждения • Амальгамное уплотнение

МОДЕЛЬ G28

КОД ЗАКАЗА Z217208

NSK Satelec®

## Модельный ряд насадок для V-держателя



Система с V-держателем от NSK является инновационной, многофункциональной и экономичной. V-держатель – это отдельный от рабочей части насадки элемент. Он может быть легко заменен без особых затрат. Система с V-держателем от компании NSK обеспечивает гибкость и широкий спектр методов применения, чтобы отвечать всем требованиям различных клинических операций.

### Реставрационные

стр.128-129

- Для минимального вмешательства



- Окончательная обработка/ Шлифовка/ Полировка



- Для препарирования дентина



### Эндодонтические

стр.127

- Для чистки корневых каналов



- Для расширения корневых каналов



### Уход за имплантами

стр.119

- Для ухода за протезами и имплантами

Perio-Control



## Насадки для ультразвуковых скалеров Varios Эндодонтическая система с V-держателем



V-держатель



\* Насадки приобретаются отдельно

МОДЕЛЬ V30

NSK | Satelec®  
КОД ЗАКАЗА Z217030

- Для чистки корневых каналов 17 мм

МОДЕЛЬ V-S50

КОД ЗАКАЗА Y900169

• Набор из 3-х штук

- Для чистки корневых каналов 23 мм

МОДЕЛЬ V-S51

КОД ЗАКАЗА Y900170

• Набор из 3-х штук

- Для чистки корневых каналов 26 мм

МОДЕЛЬ V-S52

КОД ЗАКАЗА Y900171

• Набор из 3-х штук

- Для чистки корневых каналов 32 мм

МОДЕЛЬ V-S53

КОД ЗАКАЗА Y900172

• Набор из 3-х штук

- С алмазным покрытием • Для расширения корневых каналов 17 мм

МОДЕЛЬ V-S50D

КОД ЗАКАЗА Y900173

• Набор из 3-х штук

- С алмазным покрытием • Для расширения корневых каналов 23 мм

МОДЕЛЬ V-S51D

КОД ЗАКАЗА Y900174

• Набор из 3-х штук

- С алмазным покрытием • Для расширения корневых каналов 26 мм

МОДЕЛЬ V-S52D

КОД ЗАКАЗА Y900175

• Набор из 3-х штук

- С алмазным покрытием • Для расширения корневых каналов 32 мм

МОДЕЛЬ V-S53D

КОД ЗАКАЗА Y900176

• Набор из 3-х штук

Каждый набор E11, E12 или V30 включает 1 ключ для замены насадок. При заказе других насадок ключ в комплект не входит. В этом случае заказывайте ключ отдельно.



\* Для того чтобы исключить возможность образования уступов в корневых каналах, на кончике насадки (1 мм) нет алмазного покрытия.



Возможность обработки в аппарате для термодезинфекции



Автоклавируемые при температуре до 135°C

NSK

ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА

## Насадки для ультразвуковых скалеров Varios Система с V-держателем для реставрации (с минимальным вмешательством)



V-держатель



\*Насадки приобретаются отдельно

NSK Satelec®

МОДЕЛЬ V30 КОД ЗАКАЗА Z217030

ø 0,8



МОДЕЛЬ V-G70 КОД ЗАКАЗА Y900118

• С алмазным покрытием • Комплект из 3 штук

ø 1,2



МОДЕЛЬ V-G71 КОД ЗАКАЗА Y900119

• С алмазным покрытием • Комплект из 3 штук

ø 1,6



МОДЕЛЬ V-G72 КОД ЗАКАЗА Y900120

• С алмазным покрытием • Комплект из 3 штук

ø 0,6



МОДЕЛЬ V-G75 КОД ЗАКАЗА Y900121

• С алмазным покрытием • Комплект из 3 штук

ø 0,9



МОДЕЛЬ V-G76 КОД ЗАКАЗА Y900122

• С алмазным покрытием • Комплект из 3 штук



МОДЕЛЬ Assorted Tip Kit КОД ЗАКАЗА Y900158

• Набор насадок: по 1-й насадке каждого вида

Каждый набор E11, E12 или V30 включает 1 ключ для замены насадок.

При заказе других насадок ключ в комплект не входит. В этом случае заказывайте ключ отдельно.

ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА

NSK

## Насадки для ультразвуковых скалеров Varios Система с V-держателем для реставрации (для окончательной обработки/шлифовки/полировки)



V-держатель



\*Насадки приобретаются отдельно

NSK Satelec®

МОДЕЛЬ V30 КОД ЗАКАЗА Z217030

ø 1,2



МОДЕЛЬ V-G77 КОД ЗАКАЗА Y900165

• С алмазным покрытием • Со стандартным размером алмазной крошки • Набор из 3-х штук

ø 1,2



МОДЕЛЬ V-G78 КОД ЗАКАЗА Y900166

• С алмазным покрытием • С мелким размером алмазной крошки • Набор из 3-х штук

ø 1,2



МОДЕЛЬ V-G79 КОД ЗАКАЗА Y900167

• С алмазным покрытием • С очень мелким размером алмазной крошки • Набор из 3-х штук




МОДЕЛЬ Assorted Tip Kit КОД ЗАКАЗА Y900168

• Набор насадок: по 1-й насадке каждого вида

## Насадки для ультразвуковых скалеров Varios Система с V-держателем для реставрации (для препарирования дентина)



V-держатель

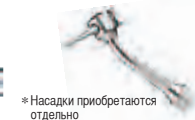

\*Насадки приобретаются отдельно

NSK Satelec®

МОДЕЛЬ V30 КОД ЗАКАЗА Z217030

ø 0,8



МОДЕЛЬ V-S1 КОД ЗАКАЗА Y900161

• Насадка из нержавеющей стали • Набор из 3-х штук

ø 1,1



МОДЕЛЬ V-S3 КОД ЗАКАЗА Y900162

• Насадка из нержавеющей стали • Набор из 3-х штук

ø 0,8



МОДЕЛЬ V-S33 КОД ЗАКАЗА Y900163

• Насадка из нержавеющей стали • Набор из 3-х штук



МОДЕЛЬ Assorted Tip Kit КОД ЗАКАЗА Y900164

• Набор насадок: по 1-й насадке каждого вида



## Насадки для ультразвуковых скалеров Varios

## Наборы насадок

Применение: **Пародонтология**

NSK Satelec®

МОДЕЛЬ Perio Kit A КОД ЗАКАЗА Y900144

Комплектация

- P1D, P2D, P3D, P10: по 1-й штуке каждого вида
- Держатель для насадок: 1 штука

Применение: **Пародонтология** Разветвление корней многокорневых зубов и искривленная корневая поверхность.

NSK Satelec®

МОДЕЛЬ Perio Kit B КОД ЗАКАЗА Y900145

Комплектация

- P20, P25R, P25L: по 1-й штуке каждого вида
- Держатель для насадок: 1 штука

Применение: **Уход за имплантатами** Для ухода за протезами и имплантатами.

NSK Satelec®

МОДЕЛЬ Perio-Control Tips Starter Kit КОД ЗАКАЗА Y1002606

Комплектация

- Держатель V10: 1 штука
- V-P11R, V-P11L, V-P12, V-P26R, V-P26L: по 1-й штуке каждого вида
- Ключ для замены насадок E-типа включен в комплект

Применение: **Эндодонтия** Для ирригации корневых каналов передних зубов.

NSK Satelec®

МОДЕЛЬ Endo Kit E11 КОД ЗАКАЗА Y900146

Комплектация

- E11: 1 штука. Держатель с углом наклона 120° для передних зубов
- Ключ для замены насадок: 1 штука
- U-файлы 33 мм #15, #20, #25, #30, #35: Набор из 6-ти штук каждого размера

5 типов U-файлов (диаметр 0,8 мм) и держатель с углом наклона 120°.



## Насадки для ультразвуковых скалеров Varios

## Наборы насадок

Применение: **Эндодонтия** Для ирригации корневых каналов задних зубов.

NSK Satelec®

МОДЕЛЬ Endo Kit E12 КОД ЗАКАЗА Y900147

Комплектация

- E12: 1 штука. Держатель с углом наклона 95° для задних зубов
- Ключ для замены насадок: 1 штука
- U-файлы 33 мм #15, #20, #25, #30, #35: Набор из 6-ти штук каждого размера

5 типов U-файлов (диаметр 0,8 мм) и держатель с углом наклона 95°.

Применение: **Эндодонтия** 4 вида насадок для ретроградной обработки корневых каналов.

NSK Satelec®

МОДЕЛЬ Retro Kit КОД ЗАКАЗА Y900149

Комплектация

- E30RD, E30LD, E31D, E32D: по 1-й штуке каждого вида
- Держатель для насадок: 1 штука

Применение: **Минимальное вмешательство** Начальный набор для минимального вмешательства с V-держателем.

NSK Satelec®

МОДЕЛЬ MI Starter Kit КОД ЗАКАЗА Y900150

Комплектация

- V-держатель V30: 1 штука
- Ключ для замены насадок E-типа: 1 штука
- V-G70, V-G71, V-G72: по 1-й штуке каждого вида
- V-S1, V-S3, V-S33: по 1-й штуке каждого вида
- V-G77, V-G78, V-G79: по 1-й штуке каждого вида





# Ti-Max S970 series

Пневматические скалеры

## Производительность и универсальность

Пневматический скалер S970 обладает широким диапазоном мощностей и их простой регулировкой на наконечнике, большим выбором насадок для различных клинических применений - от снятия зубных отложений и промывки корневых каналов до минимально инвазивного препарирования. Широкий спектр применений, эргономичный захват и простое обслуживание делают пневматический скалер S970 идеальным выбором как для стоматологов общей практики, так и для гигиенистов. Титановый корпус и бесшовный, гладкий дизайн скалера S970 обеспечивают комфорт руке врача при работе даже при выполнении длительных процедур и предоставляют превосходный обзор операционного поля.



### Преимущества

- Двойная подсветка LED с двумя оптическими световодами
- Наконечник с оптикой и без оптики
- Широкий спектр насадок для различных клинических применений

## Технология LED от NSK обеспечивает естественное дневное освещение

При подсоединении к переходникам LED от NSK скалер S970L обеспечивает качество подсветки операционного поля, сравнимое с естественным дневным освещением, снижает напряжение глаз оператора во время проведения процедуры. Более четкая видимость позволяет проводить более точное и быстрое лечение.

**Стабильнее** : специальная плата в переходнике регулирует входное напряжение для обеспечения постоянного качества освещения.


**Ярче** : LED излучает дневной свет, обеспечивающий лучшую видимость, чем свет от галогенной лампы.

**Надежнее** : Светодиод LED имеет больший срок службы и более надежен по сравнению с галогенными лампами.




## Стабильная выходная мощность

Пневматические скалеры S970 имеют стабильную выходную мощность и устойчивую вибрацию насадки во всем диапазоне мощностей на частоте примерно 6 000 Гц. Скалеры S970 очень популярны для использования в пародонтологии и процедурах, требующих высокой чувствительности, так как имеют щадящий режим работы насадки.

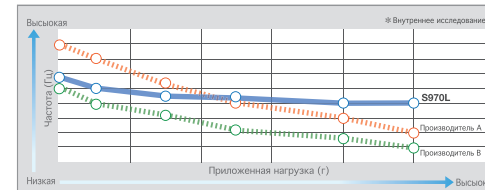


## Превосходный обзор

Гладкий дизайн скалера S970 обеспечивает полную видимость операционного поля и превосходный доступ в труднодоступные места.

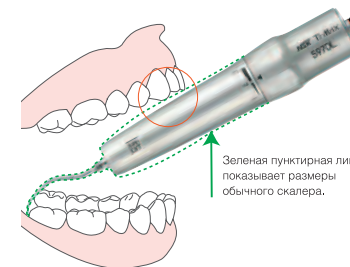

## Плавная и простая регулировка мощности

Кольцо регулировки мощности предоставляет возможность установить 3 уровня мощности для различных клинических применений. Минимальный режим вибрации предназначен для деликатных операций, в то время как режим максимальной мощности используется для снятия твердых зубных отложений.

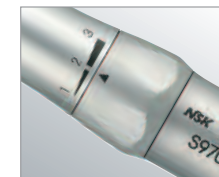

NSK

ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА

## Ti-Max S970 series

- Титановый корпус с покрытием DURACOAT против царапин
- Оптика из сотообразного стекла
- 3 уровня мощности на регулировочном кольце
- Частота колебаний: 5 800-6 200 Гц
- 3 насадки (S1, S2 и S3), ключ для замены насадок (CR-20) и колпачок для насадки (L)

Подсоединение к переходникам NSK  




**С оптикой** МОДЕЛЬ S970L КОД ЗАКАЗА T1005

**Без оптики** МОДЕЛЬ S970 КОД ЗАКАЗА T1020


Прямое подсоединение к переходникам KaVo®, Sirona®



 Переходник KaVo® с технологией LED

**С оптикой** МОДЕЛЬ S970KL КОД ЗАКАЗА T1013



 Переходник Sirona® с технологией LED

**С оптикой** МОДЕЛЬ S970SL КОД ЗАКАЗА T1015



ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА

NSK

## Пневматические скалеры AS2000

- Частота колебаний: 5 600-5 850 Гц
- 3 насадки (S1, S2 и S3), ключ для замены насадок (CR-20) и колпачок для насадки (L)



**Без оптики** МОДЕЛЬ AS2000 M4 КОД ЗАКАЗА T698

- Для 4-канального разъема Midwest • Вес: 67 г

**Без оптики** МОДЕЛЬ AS2000 B2/B3 КОД ЗАКАЗА T697

- Для 2/3-канального разъема Borden • Вес: 64 г





## Насадки для пневматических скалеров

## Удаление зубного камня



- Универсальная насадка

МОДЕЛЬ S1 КОД ЗАКАЗА Z252411



- Серповидной формы

МОДЕЛЬ S2 КОД ЗАКАЗА Z252413



- Для пародонтологического лечения

МОДЕЛЬ S3 КОД ЗАКАЗА Z252412


## Насадки для пневматических скалеров

## Пародонтология




- Универсальная тонкая насадка

МОДЕЛЬ S10 КОД ЗАКАЗА Z252420

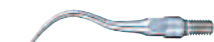

- Для обработки корневых каналов (прямая)

МОДЕЛЬ S20 КОД ЗАКАЗА Z252441

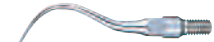

- Для обработки корневых каналов (с наклоном вправо)

МОДЕЛЬ S21R КОД ЗАКАЗА Z252442



- Для обработки корневых каналов (с наклоном влево)

МОДЕЛЬ S21L КОД ЗАКАЗА Z252443



## Насадки для пневматических скалеров Уход за имплантами (V-держатели)

## Perio-Control



V-держатель



МОДЕЛЬ S35 КОД ЗАКАЗА Z252015

- Ключ для замены насадок E-типа включен в комплект
- \* Пластиковая насадка приобретается отдельно



МОДЕЛЬ V-P10 КОД ЗАКАЗА Y900184

- Набор из 3-х штук
- \* Держатель S35 не включен в комплект



МОДЕЛЬ V-P12 КОД ЗАКАЗА Y1002167

- Набор из 3-х штук
- \* Держатель S35 не включен в комплект



МОДЕЛЬ V-P11R КОД ЗАКАЗА Y1002165

- С наклоном вправо • Набор из 3-х штук
- \* Держатель S35 не включен в комплект

(Сверху)



МОДЕЛЬ V-P11L КОД ЗАКАЗА Y1002166

- С наклоном влево • Набор из 3-х штук
- \* Держатель S35 не включен в комплект

(Сверху)

## Набор насадок для пневматических скалеров



МОДЕЛЬ Perio-Control Tips Air Scaler Kit КОД ЗАКАЗА Y1002754

- Держатель S35: 1 шт.
- V-P10, V-P11R, V-P11L, V-P12: по 1-й штучке каждого вида
- Ключ для замены насадок E-типа включен в комплект



## Насадки для пневматических скалеров

Система с V-держателем для реставрации  
(для минимального вмешательства)

МОДЕЛЬ S65D КОД ЗАКАЗА Z252465

• С алмазным покрытием



МОДЕЛЬ S66D КОД ЗАКАЗА Z252466

• С алмазным покрытием



МОДЕЛЬ S67D КОД ЗАКАЗА Z252467

• С алмазным покрытием



МОДЕЛЬ S68D КОД ЗАКАЗА Z252468

• С алмазным покрытием



## Насадки для пневматических скалеров

Система с V-держателем для реставрации  
(Для подготовки уступов под коронку)

МОДЕЛЬ S81D КОД ЗАКАЗА Z252469

• С алмазным покрытием



МОДЕЛЬ S82D КОД ЗАКАЗА Z252462

• С алмазным покрытием



МОДЕЛЬ S83D КОД ЗАКАЗА Z252461

• С алмазным покрытием



МОДЕЛЬ S86D КОД ЗАКАЗА Z252460

• С алмазным покрытием



МОДЕЛЬ S71D КОД ЗАКАЗА Z252471

• С алмазным покрытием



МОДЕЛЬ S72D КОД ЗАКАЗА Z252472

• С алмазным покрытием



## Модельный ряд насадок для V-держателя



Система с V-держателем от NSK является инновационной, многофункциональной и экономичной. V-держатель – это отдельный от рабочей части насадки элемент. Он может быть легко заменен без особых затрат. Система с V-держателем от компании NSK обеспечивает гибкость и широкий спектр методов применения, чтобы отвечать всем требованиям различных клинических операций.


### Реставрационные

стр.142-143

• Для минимального вмешательства


• Окончательная обработка/ Шлифовка/ Полировка

• Для препарирования дентина

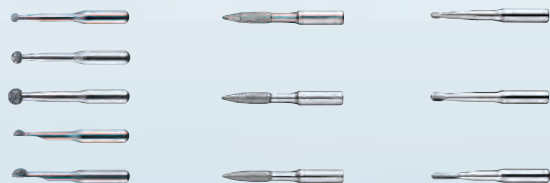

### Эндодонтические

стр.141

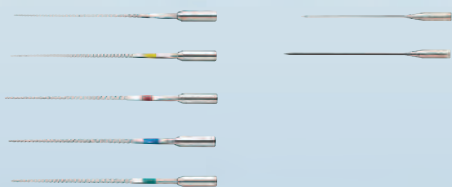

**S75**  
С углом наклона 120°

### Уход за имплантатами

стр.137

• Для ухода за протезами и имплантатами

Perio-Control



**S35**  
Прямой

## Насадки для пневматических скалеров Эндодонтическая система с V-держателем



V-держатель

МОДЕЛЬ **S75** КОД ЗАКАЗА **Z252035**

• Ключ для замены насадок E-типа включен в комплект

МОДЕЛЬ **V-U15** КОД ЗАКАЗА **Y900177**

• V-файл для ирригации 23 мм #15 • ISO15 • Набор из 6-ти штук

МОДЕЛЬ **V-U20** КОД ЗАКАЗА **Y900178**

• V-файл для ирригации 23 мм #20 • ISO20 • Набор из 6-ти штук

МОДЕЛЬ **V-U25** КОД ЗАКАЗА **Y900179**

• V-файл для ирригации 23 мм #25 • ISO25 • Набор из 6-ти штук

МОДЕЛЬ **V-U30** КОД ЗАКАЗА **Y900180**

• V-файл для ирригации 23 мм #30 • ISO30 • Набор из 6-ти штук

МОДЕЛЬ **V-U35** КОД ЗАКАЗА **Y900181**

• V-файл для ирригации 23 мм #35 • ISO35 • Набор из 6-ти штук

МОДЕЛЬ **V-N50** КОД ЗАКАЗА **Y900182**

• Ni-Ti файл для ирригации 17 мм • Набор из 3-х штук

МОДЕЛЬ **V-N51** КОД ЗАКАЗА **Y900183**

• Ni-Ti файл для ирригации 21 мм • Набор из 3-х штук



Возможность обработки в аппарате для термодезинфекции



Автоклавируемые при температуре до 135°C

## Насадки для пневматических скалеров

Система с V-держателем для реставрации  
(для минимального вмешательства)

V-держатель

\* Насадки приобретаются  
отдельно

МОДЕЛЬ S75 КОД ЗАКАЗА Z252035

• Ключ для замены насадок E-типа включен  
в комплект

ø 0,8



МОДЕЛЬ V-G70 КОД ЗАКАЗА Y900118

• С алмазным покрытием • Комплект из 3-х штук

ø 1,2



МОДЕЛЬ V-G71 КОД ЗАКАЗА Y900119

• С алмазным покрытием • Комплект из 3-х штук

ø 1,6



МОДЕЛЬ V-G72 КОД ЗАКАЗА Y900120

• С алмазным покрытием • Комплект из 3-х штук

ø 0,6



МОДЕЛЬ V-G75 КОД ЗАКАЗА Y900121

• С алмазным покрытием • Комплект из 3-х штук

ø 0,9



МОДЕЛЬ V-G76 КОД ЗАКАЗА Y900122

• С алмазным покрытием • Комплект из 3-х штук


МОДЕЛЬ Assorted КОД ЗАКАЗА Y900158  
Tip Kit

• Набор насадок: по 1-й насадке каждого вида

## Насадки для пневматических скалеров

Система с V-держателем для реставрации  
(для окончательной обработки/шлифовки/полировки)

V-держатель

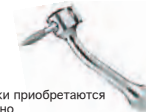\* Насадки приобретаются  
отдельно

МОДЕЛЬ S75 КОД ЗАКАЗА Z252035

• Ключ для замены насадок E-типа включен  
в комплект

ø 1,2



МОДЕЛЬ V-G77 КОД ЗАКАЗА Y900165

• С алмазным покрытием • Со стандартным размером  
алмазной крошки • Набор из 3-х штук

ø 1,2



МОДЕЛЬ V-G78 КОД ЗАКАЗА Y900166

• С алмазным покрытием • С мелким размером  
алмазной крошки • Набор из 3-х штук

ø 1,2



МОДЕЛЬ V-G79 КОД ЗАКАЗА Y900167

• С алмазным покрытием • С очень мелким размером  
алмазной крошки • Набор из 3-х штукМОДЕЛЬ Assorted КОД ЗАКАЗА Y900168  
Tip Kit

• Набор насадок: по 1-й насадке каждого вида

## Насадки для пневматических скалеров

Система с V-держателем для реставрации  
(для препарирования дентина)

V-держатель

\* Насадки приобретаются  
отдельно

МОДЕЛЬ S75 КОД ЗАКАЗА Z252035

• Ключ для замены насадок E-типа включен  
в комплект

ø 0,8



МОДЕЛЬ V-S1 КОД ЗАКАЗА Y900161

• Насадка из нержавеющей стали • Набор из 3-х штук

ø 1,1



МОДЕЛЬ V-S3 КОД ЗАКАЗА Y900162

• Насадка из нержавеющей стали • Набор из 3-х штук

ø 0,8



МОДЕЛЬ V-S33 КОД ЗАКАЗА Y900163

• Насадка из нержавеющей стали • Набор из 3-х штук

МОДЕЛЬ Assorted КОД ЗАКАЗА Y900164  
Tip Kit

• Набор насадок: по 1-й насадке каждого вида




# Prophy-Mate neo



## Система для полирования

Усовершенствованная система Prophy-Mate neo – это удобная форма и отличная функциональность. Совершенная балансировка и легкий вес, компактный резервуар для порошка, вращение наконечника NSK на 360° относительно шланга даже при высоком давлении, все это делает систему Prophy-Mate neo отличным инструментом для врача. Благодаря функциональности и простоте использования данная система сокращает время проведения процедур снятия зубного камня и налета. Prophy-Mate neo оснащается насадками с углом 60° и 80°.

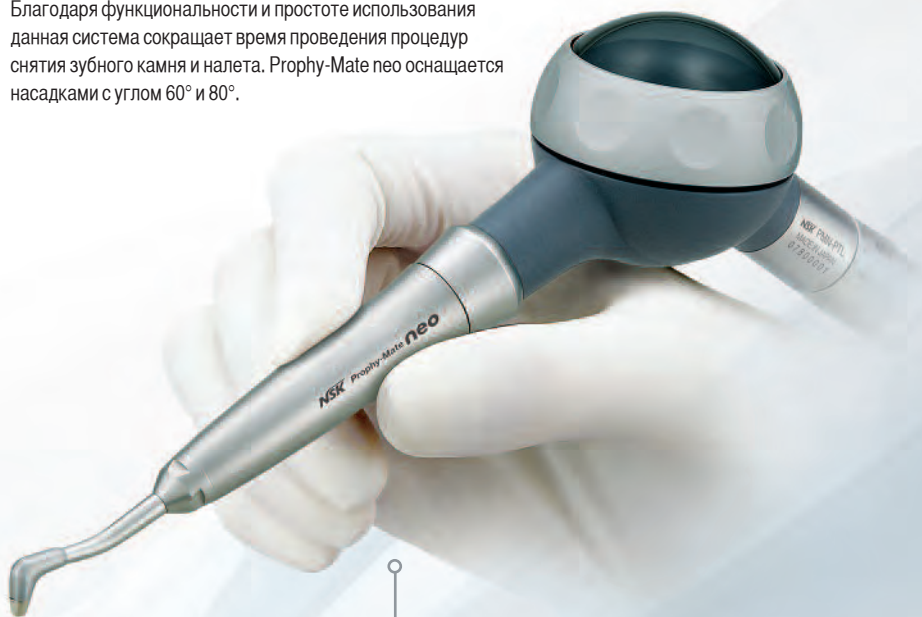

### Применение

- Удаление зубного камня и отбеливание
- Протравка эмали, дентина и фарфора перед цементированием
- Подготовка к заполнению трещин и дупел

### Преимущества

- Прочность и надежность
- Простота в использовании
- Простота в обслуживании
- Быстрое подсоединение к переходникам большинства известных производителей
- Возможность выбора насадок 60° и 80°

### Характеристики

- Инновационные насадки с углом изгиба 60° или 80° повышают эффективность применения
- Легкий и компактный наконечник
- Два шарнирных соединения, вращающихся на 360° для лучшего доступа и удобного использования
- Только наконечник системы Prophy-Mate neo можно промывать в термодезинфекторе\*


### Эргономичный комфортный дизайн

Легкий, компактный дизайн и хорошая балансировка системы обеспечивают комфортное использование с минимальным напряжением руки при работе, таким образом способствуя проведению более качественного лечения.



### Плавное и свободное вращение на 360°

Два шарнирных соединения, вращающихся на 360°, повышают удобство использования, гибко реагируя на движения кончиков пальцев и регулируя угол наклона насадки без особых усилий.

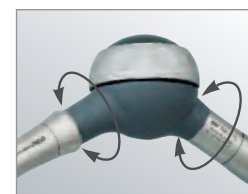

### Простое крепление с помощью одного движения руки

Prophy-Mate neo специально сконструирован для удобного и простого крепления напрямую на переходники NSK, а также для использования с большинством переходников известных мировых производителей.




### Улучшенные полирующие качества

Две оригинальные насадки NSK обладают большей мощностью при проведении манипуляций. За счет мощного потока продолжительность использования значительно снижается, сокращая время лечения.




### Быстросъемные насадки с углами 60° и 80°

Насадки с углом изгиба 60° или 80° максимально улучшают процесс лечения. Насадка с углом 60° применяется в молярной и окклюзионной области, а насадка с углом 80° – для передних зубов.

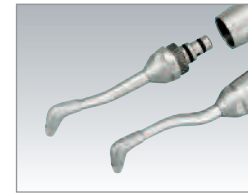

\*Не обрабатывайте резервуар для порошка и крышку резервуара в термодезинфекторе.



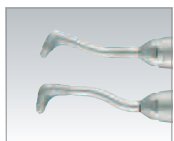




## Prophy-Mate neo Система полировки



Насадки 60° и 80°



### Комплекты Prophy-Mate neo

<b>NSK</b>	МОДЕЛЬ PMNG-PTL-P	КОД ЗАКАЗА Y135029	 NSK Coupling
<b>KaVo®</b>	МОДЕЛЬ PMNG-KV-P	КОД ЗАКАЗА Y135030	 KaVo® LED Coupling
<b>Sirona®</b>	МОДЕЛЬ PMNG-SR-P	КОД ЗАКАЗА Y135031	 Sirona® LED Coupling
<b>W&amp;H®</b>	МОДЕЛЬ PMNG-WH-P	КОД ЗАКАЗА Y135032	 W&H® Roto Quick
<b>Bien-Air®</b>	МОДЕЛЬ PMNG-BA-P	КОД ЗАКАЗА Y135033	 Bien-Air® Unifix®
<b>M4</b>	МОДЕЛЬ PMNG-M4-P	КОД ЗАКАЗА Y135034	 Прямое подсоединение к разъему MIDWEST
<b>B2</b>	МОДЕЛЬ PMNG-B2-P	КОД ЗАКАЗА Y135035	 Прямое подсоединение к разъему BORDEN

#### Комплектация

- Наконечник с насадкой 60°
- Резервуар для порошка
- Сменная насадка 80°
- 5 пакетиков чистящего порошка FLASH pearl по 15 г
- Набор для ухода



## FLASH pearl

### Блестящие результаты при каждом применении

FLASH pearl – это чистящий порошок для Prophy-Mate neo с округлыми гранулами, разработанный для плавного перемещения по поверхности зубов и проникновения во все труднодоступные места для быстрой очистки. Сферическая форма порошковых гранул уменьшает вероятность разрушения зуба и мягких тканей во время удаления пятен и камня и действует быстро и безопасно. Основа FLASH pearl – это кальций, имеющий естественный вкус. Порошок не формирует массы, забивающей насадку, поэтому наконечник Prophy-Mate neo легко обслуживать.


\*Побочные эффекты у данного продукта не обнаружены.

#### Преимущества


- Высокая очищающая способность
- Быстрый результат
- Мягкий и нежный
- Натуральный вкус без примеси соды
- Разлагается естественным биологическим образом и не образует комков
- Подходит для полировочных систем всех производителей

#### Сферические гранулы удаляют зубной налет из всех труднодоступных уголков

Гранулы FLASH pearl маленькие и имеют сферическую форму в отличие от частиц порошка бикарбоната натрия. Это обеспечивает лучший контакт и доступ ко всем очищаемым поверхностям. Более направленный угол действия также обеспечивает большую безопасность при обработке.

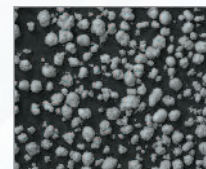

FLASH pearl

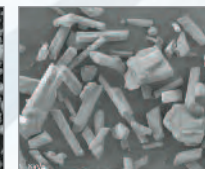

Обычный порошок бикарбоната натрия

#### Чистящий порошок для Prophy-Mate neo

МОДЕЛЬ FLASH pearl КОД ЗАКАЗА Y900693

- Упакован в оригинальную удобную коробку
- Содержит 100 пакетиков по 15 г.



МОДЕЛЬ FLASH pearl (Bottle) КОД ЗАКАЗА Y900698

- 4 бутылки упакованные в коробку
- В комплекте мерный стаканчик
- Емкость каждой бутылки – 300 мл



# Чистящий порошок

## Белые зубы для красивой улыбки

Чистящий порошок с ароматом свежего лимона удаляет пятна, зубной камень и налет и делает это быстро и эффективно. Придайте блеск улыбкам ваших клиентов с помощью чистящего порошка.

### Характеристики

- Чистящий порошок имеет вкус свежего лимона
- Содержит влагостойкий бикарбонат натрия
- Быстро удаляет въевшиеся пятна и камень



### Чистящий порошок

МОДЕЛЬ **Cleaning Powder** КОД ЗАКАЗА **Y900052**

- Содержит 100 пакетиков по 12 гр

# Perio-Mate

Наконечник для  
удаления биопленки



При проведении процедур по очистке внутри периодонтальных карманов ключевым моментом является исключение повреждения мягких тканей и поверхности корня зуба. Ультратонкий водяной спрей в сочетании с порошком на основе глицина «Perio-Mate Powder» аккуратно удаляет биопленку в периодонтальных карманах всего за 20 секунд.

Благодаря многолетнему опыту изучения динамики потока жидкостей для создания турбинных наконечников компания NSK разработала безопасную и высокоэффективную технологию генерации спрея, позволяющую быстро и точно удалить налёт биопленки из поддесневых областей.

## Преимущества

- Инновационная насадка от NSK
- Точная и безупречная подача порошка
- Простой уход
- Кольцо регулировки мощности
- Тонкий дизайн носика наконечника
- Плавное вращение на 360°



## Инновационная насадка от NSK

Новый дизайн насадки от NSK основывается на использовании сочетания полупрозрачных материалов, способствующих лучшему обзору во время проведения процедур. Одноразовые гигиенические насадки удобны в эксплуатации и безопасны.

## Гибкая пластиковая насадка удобна в использовании и безопасна для зубодесневых карманов

Тонкая насадка имеет правильную степень жесткости для плавного перемещения по поверхности зуба и легко проникает в тесные зубодесневые карманы и в корневую зону смежных зубов, не причиняя дискомфорт пациенту.




## Совершенная форма наконечника, основанная на исследовании динамики жидкости, обеспечивает безупречную подачу порошка в зубодесневой карман

Многолетний опыт по созданию турбинных наконечников и тщательный анализ динамики потока жидкости позволил компании NSK досконально изучить и понять, какие манипуляции должен совершать врач в ограниченном пространстве зубодесневого кармана.



## Преимущества использования тонкого наконечника в узких участках ротовой полости

Длинная узкая форма наконечника создана для простого доступа к областям, требующим локализации наконечника под определенным углом, например, такой, как в зоне между молярами.

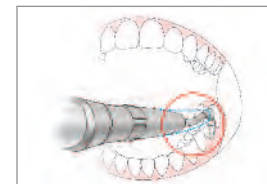

## Плавное вращение на 360 градусов для безопасной и точной обработки

Даже при выполнении сложных операций наконечник легко повернуть движением пальцев. Насадка легко проникает в труднодоступные места, не нанося вред соседним зубам и контурам.



## Кольцо регулировки потока порошка

Удобное в использовании кольцо регулировки подачи порошка позволяет быстрым движением пальца точно настроить скорость потока порошка. Более того, простой контроль и возможность остановки потока порошка позволяют удалять биопленку в зоне лечения, не отрываясь от процедуры.



## Уход

Для чистки и дезинфекции вы можете легко отсоединить наконечник, насадку и резервуар для порошка.





NSK

ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА








# Perio-Mate

Наконечник для удаления биопленки



Гигиена полости рта

## Комплекты Perio-Mate

NSK	МОДЕЛЬ PER-PTL-P	КОД ЗАКАЗА Y1002654		NSK Coupling
KaVo®	МОДЕЛЬ PER-KV-P	КОД ЗАКАЗА Y1002655		KaVo® LED Coupling
Sirona®	МОДЕЛЬ PER-SR-P	КОД ЗАКАЗА Y1002656		Sirona® LED Coupling
W&H®	МОДЕЛЬ PER-WH-P	КОД ЗАКАЗА Y1002657		W&H® Roto Quick
Bien-Air®	МОДЕЛЬ PER-BA-P	КОД ЗАКАЗА Y1002658		Bien-Air® UniFix®
M4	МОДЕЛЬ PER-M4-P	КОД ЗАКАЗА Y1002659		Прямое подключение к разъему MIDWEST
B2	МОДЕЛЬ PER-B2-P	КОД ЗАКАЗА Y1002660		Прямое подключение к разъему BORDEN

### Комплектация

- Наконечник
- Резервуар для порошка
- Насадка (40 шт.)
- Набор для обслуживания

## Насадка Perio-Mate

Гигиенические одноразовые насадки

МОДЕЛЬ Perio-Mate Nozzle Tip

КОД ЗАКАЗА Y1002741

• 40 шт. в упаковке



- Не обрабатывайте резервуар для порошка и крышку резервуара в термодезинфекторе.



Наконечник можно промывать в аппарате для термодезинфекции



Автоматическое стерилирование при температуре до 135°C

ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА


NSK

# Perio-Mate Powder

## Порошок для поддесневых операций для использования с пескоструйными системами

### Снижение количества бактерий

Пескоструйная обработка с помощью порошка Perio-Mate (на основе глицина) намного лучше устраняет бактерии, чем ручная обработка.

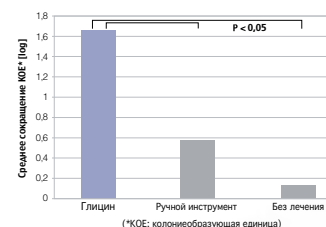

Petersilka G., Tunkel J., Barakos K., Heinecke A., Haberlein I., Flemming T.F.: Удаление поддесневых отложений в межзубных пространствах с использованием низкоабразивного полирующего порошка. Пародонтологический журнал, 2003, Том 74, Номер 3


Гигиена полости рта

### Безопасная чистка зубов



Традиционные полировочные порошки

- размер частиц до 200 мкм
- следует использовать не более двух раз в год из-за высокой абразивности

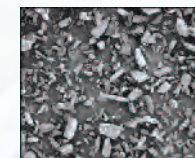

Порошок Perio-Mate

- размер частиц <45 мкм
- может использоваться неограниченное количество раз



- На основе глицина
- Средний размер <45 мкм

МОДЕЛЬ Perio-Mate Powder КОД ЗАКАЗА Y900938

- 4 бутылки, упакованные в коробку
- Каждая бутылка содержит 100 гр порошка

### Клиническая процедура

- Для удаления биопленки в зубодесневом кармане одного зуба при идеальных условиях необходимо примерно 20 секунд (по 5 секунд на каждую сторону).
- Применяется для лечения периимплантита в пределах глубины 5 мм в области воспаленной десны. (Для использования системы при пародонтите и периимплантите после начального этапа лечения необходимо провести терапевтическое лечение; только для пародонтальных карманов с глубиной не более 5 мм).

\* Протокол лечения доступен по запросу, а также его можно найти на нашем веб-сайте [www.nsk-inc.com](http://www.nsk-inc.com).