

---

### Стерилизующий агент



Одноразовая кассета Reno со стерилизующим средством

Состав: пероксид водорода (50%) в жидкой форме – герметичные одноразовые капсулы.

Использование: 1 кассета / цикл.

Срок хранения: 12 месяцев.

Условия хранения: 5-30 °С.

#### Модификации:

- SA – для Reno S30, Reno D50
- SA 10 – для Reno S130, Reno S130D
- SA 20 – для Reno S20
- SA 90 – для Reno S90

---

### Биологический индикатор



Биологический индикатор качества стерилизации.

Для контроля качества стерилизации используются бактериальные споры *Geobacillus Stearotherophilus*.

Инкубационное время: 24 часа (при 55-60 °С).

Популяция спор: 10<sup>6</sup> спор / колба.

Срок хранения: до 18 месяцев.

Условия хранения: комнатная температура, сухое помещение, вдали от солнечных лучей.

В коробке: 30 шт.

---

### Индикаторные полоски



Химический индикатор в полосках размещается внутри каждой упаковки со стерилизуемыми инструментами для проверки успешности стерилизации.

Срок хранения: до 2 лет.

Условия хранения: комнатная температура, сухое помещение, вдали от солнечных лучей.

В упаковке: 250 шт.

---

### Термобумага для принтера



Встроенный принтер с термотрансферной системой печати позволяет RENO распечатывать параметры стерилизации.

Условия хранения: комнатная температура, сухое помещение, вдали от солнечных лучей.

В упаковке: 5 рулонов.

---



#### **Нетканое полотно**

Используется для обертывания стерилизуемых материалов. Предотвращает контакт с загрязняющими веществами.

---



#### **Биологический инкубатор**

Специально разработан для инкубации биологического индикатора после процесса стерилизации для поддержания постоянной температуры, что способствует росту и культивированию микроорганизмов в биологическом индикаторе.

Инкубационная температура: 56-58 °С.

Инкубационное время: 24 часа.

Подключение: 220 В, 50 Гц.

---




#### **Индикаторная лента**

Применяется для проверки качества стерилизации. Ленту размещают внутри упаковки с обрабатываемыми инструментами.

Размеры: 1.9 см × 55 м.

Условия хранения: комнатная температура, сухое помещение, вдали от солнечных лучей.

---

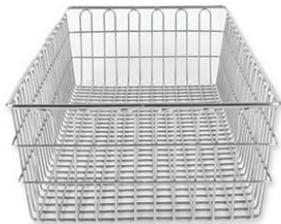

#### **Корзина для инструментов**

Позволяют защитить инструмент во время стерилизации, а также разместить нужное количество инструментов на один цикл стерилизации.

---



#### **Пакеты для стерилизации Tyvek**

Используются для упаковки медицинских инструментов во время стерилизации, а также для хранения их до момента использования.

Размеры:

- длина 70 м

- ширина 75 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 400 мм

---