


СТЕНТЫ КОРОНАРНЫЕ КОБАЛЬТОВО-ХРОМОВЫЕ С ПАКЛИТАКСЕЛЕМ PAXEL® с системой доставки Rapid Exchange (RX)

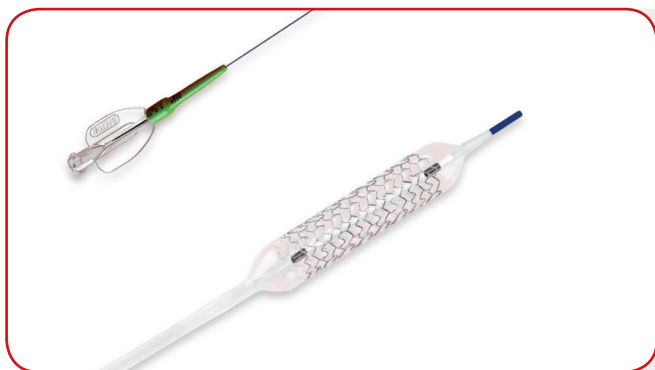

PAXEL® является кобальтово-хромовым коронарным стентом с низким профилем входа (0.34"), выделяющим паклитаксель из биodeградируемого полимера.

Уникальная технология покрытия стента позволяет получить суперэластичный слой биodeградируемого полимера, носителя вещества, обладающего антипролиферативным действием. Слои полимера высвобождают паклитаксель в регулируемом по времени процессе их медленной биodeградации (продолжающейся около 8 недель), приостанавливая процесс формирования неоинтимы.

- предназначен для узких и извитых сосудов
- уникальная конструкция стента, обеспечивающая высокую степень гибкости
- легкость продвижения по сосудам

Технические данные

Материал стента	Кобальтово-хромовый сплав L605
Полимер	Биodeградируемый
Антипролиферативное средство	Паклитаксель
Номинальный диаметр стента	2.00 мм – 4.50 мм
Номинальные длины стента	8 мм – 40 мм
Толщина стенок стента	0.07 мм
Видимость в рентгеновских лучах	Очень хорошая
Ферромагнетизм	Нет
МРТ	Безопасная
Совместимость с проводником	Макс. .014"
Совместимость с катетером	5F (.056")*
Радиальная сила	Высокая
Легкость продвижения по сосудам	Отличная
Сжатый профиль стента	.034"***
Диаметр проксимальной части	1.8F/0.60 мм
Диаметр дистальной части	2.5F/0.84 мм
Номинальное давление	8 атм.
Тип системы доставки	Rapid Exchange
Длина системы доставки	140 см

* для стента диаметром 4.5 мм рекомендуем применять направляющий катетер 6F (0.64")

*** для стента диаметром 3 мм

Кат. №	Диаметр / длина стента	Кат. №	Диаметр / длина стента	Кат. №	Диаметр / длина стента
ZSTC2.00x0814CL	2.00 / 8 мм	ZSTC3.00x0814CL	3.00 / 8 мм	ZSTC3.75x0814CL	3.75 / 8 мм
ZSTC2.00x1014CL	2.00 / 10 мм	ZSTC3.00x1014CL	3.00 / 10 мм	ZSTC3.75x1014CL	3.75 / 10 мм
ZSTC2.00x1214CL	2.00 / 12 мм	ZSTC3.00x1214CL	3.00 / 12 мм	ZSTC3.75x1214CL	3.75 / 12 мм
ZSTC2.00x1514CL	2.00 / 15 мм	ZSTC3.00x1514CL	3.00 / 15 мм	ZSTC3.75x1514CL	3.75 / 15 мм
ZSTC2.00x1814CL	2.00 / 18 мм	ZSTC3.00x1814CL	3.00 / 18 мм	ZSTC3.75x1814CL	3.75 / 18 мм
ZSTC2.00x2214CL	2.00 / 22 мм	ZSTC3.00x2214CL	3.00 / 22 мм	ZSTC3.75x2214CL	3.75 / 22 мм
ZSTC2.00x2514CL	2.00 / 25 мм	ZSTC3.00x2514CL	3.00 / 25 мм	ZSTC3.75x2514CL	3.75 / 25 мм
		ZSTC3.00x2914CL	3.00 / 29 мм	ZSTC3.75x2914CL	3.75 / 29 мм
ZSTC2.25x0814CL	2.25 / 8 мм	ZSTC3.00x3414CL	3.00 / 34 мм	ZSTC3.75x3414CL	3.75 / 34 мм
ZSTC2.25x1014CL	2.25 / 10 мм	ZSTC3.00x3614CL	3.00 / 36 мм	ZSTC3.75x3614CL	3.75 / 36 мм
ZSTC2.25x1214CL	2.25 / 12 мм	ZSTC3.00x3814CL	3.00 / 38 мм	ZSTC3.75x3814CL	3.75 / 38 мм
ZSTC2.25x1514CL	2.25 / 15 мм	ZSTC3.00x4014CL	3.00 / 40 мм	ZSTC3.75x4014CL	3.75 / 40 мм
ZSTC2.25x1814CL	2.25 / 18 мм				
ZSTC2.25x2214CL	2.25 / 22 мм	ZSTC3.25x0814CL	3.25 / 8 мм	ZSTC4.00x0814CL	4.00 / 8 мм
ZSTC2.25x2514CL	2.25 / 25 мм	ZSTC3.25x1014CL	3.25 / 10 мм	ZSTC4.00x1014CL	4.00 / 10 мм
ZSTC2.25x2914CL	2.25 / 29 мм	ZSTC3.25x1214CL	3.25 / 12 мм	ZSTC4.00x1214CL	4.00 / 12 мм
		ZSTC3.25x1514CL	3.25 / 15 мм	ZSTC4.00x1514CL	4.00 / 15 мм
ZSTC2.50x0814CL	2.50 / 8 мм	ZSTC3.25x1814CL	3.25 / 18 мм	ZSTC4.00x1814CL	4.00 / 18 мм
ZSTC2.50x1014CL	2.50 / 10 мм	ZSTC3.25x2214CL	3.25 / 22 мм	ZSTC4.00x2214CL	4.00 / 22 мм
ZSTC2.50x1214CL	2.50 / 12 мм	ZSTC3.25x2514CL	3.25 / 25 мм	ZSTC4.00x2514CL	4.00 / 25 мм
ZSTC2.50x1514CL	2.50 / 15 мм	ZSTC3.25x2914CL	3.25 / 29 мм	ZSTC4.00x2914CL	4.00 / 29 мм
ZSTC2.50x1814CL	2.50 / 18 мм	ZSTC3.25x3414CL	3.25 / 34 мм	ZSTC4.00x3414CL	4.00 / 34 мм
ZSTC2.50x2214CL	2.50 / 22 мм	ZSTC3.25x3614CL	3.25 / 36 мм	ZSTC4.00x3614CL	4.00 / 36 мм
ZSTC2.50x2514CL	2.50 / 25 мм	ZSTC3.25x3814CL	3.25 / 38 мм	ZSTC4.00x3814CL	4.00 / 38 мм
ZSTC2.50x2914CL	2.50 / 29 мм	ZSTC3.25x4014CL	3.25 / 40 мм	ZSTC4.00x4014CL	4.00 / 40 мм
ZSTC2.50x3414CL	2.50 / 34 мм				
		ZSTC3.50x0814CL	3.50 / 8 мм	ZSTC4.50x0814CL	4.50 / 8 мм
ZSTC2.75x0814CL	2.75 / 8 мм	ZSTC3.50x1014CL	3.50 / 10 мм	ZSTC4.50x1014CL	4.50 / 10 мм
ZSTC2.75x1014CL	2.75 / 10 мм	ZSTC3.50x1214CL	3.50 / 12 мм	ZSTC4.50x1214CL	4.50 / 12 мм
ZSTC2.75x1214CL	2.75 / 12 мм	ZSTC3.50x1514CL	3.50 / 15 мм	ZSTC4.50x1514CL	4.50 / 15 мм
ZSTC2.75x1514CL	2.75 / 15 мм	ZSTC3.50x1814CL	3.50 / 18 мм	ZSTC4.50x1814CL	4.50 / 18 мм
ZSTC2.75x1814CL	2.75 / 18 мм	ZSTC3.50x2214CL	3.50 / 22 мм	ZSTC4.50x2214CL	4.50 / 22 мм
ZSTC2.75x2214CL	2.75 / 22 мм	ZSTC3.50x2514CL	3.50 / 25 мм	ZSTC4.50x2514CL	4.50 / 25 мм
ZSTC2.75x2514CL	2.75 / 25 мм	ZSTC3.50x2914CL	3.50 / 29 мм	ZSTC4.50x2914CL	4.50 / 29 мм
ZSTC2.75x2914CL	2.75 / 29 мм	ZSTC3.50x3414CL	3.50 / 34 мм	ZSTC4.50x3414CL	4.50 / 34 мм
ZSTC2.75x3414CL	2.75 / 34 мм	ZSTC3.50x3614CL	3.50 / 36 мм	ZSTC4.50x3614CL	4.50 / 36 мм
ZSTC2.75x3614CL	2.75 / 36 мм	ZSTC3.50x3814CL	3.50 / 38 мм	ZSTC4.50x3814CL	4.50 / 38 мм
		ZSTC3.50x4014CL	3.50 / 40 мм	ZSTC4.50x4014CL	4.50 / 40 мм

Примерный номер по каталогу: ZSTC3.00x1214CL.